

e-HPLC ことり

コンパクトで
簡単操作の本格HPLC
(高速液体クロマトグラフ)

デモ機
貸出
OK


フィールド
分析

<分析例>


- ◆お茶のカフェイン・
ビタミンC・カテキン分析
- ◆サプリメントの
EPA・DHA分析
- ◆河川水や飲料水の
イオン分析等

測定結果

<牛肉の旨味成分 (イノシン酸) 測定>

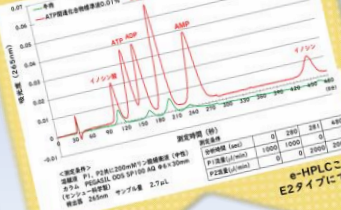

<陽イオン分析>

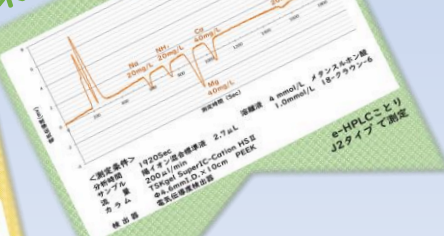

ことりの特長

1 コンパクト

持ち運びができる本格HPLC
最大重量 2.2~2.9Kg
A4用紙1/3の大きさ

2 簡単操作

1. PCとことりを接続、パラメータ設定をする
 2. レバーを上げる
 3. サンプルを注入
 4. レバーを下げる
- 測定開始

3 オーダー制

分析項目に合わせ
装置をカスタマイズします

ポンプ	ヘッド	検出器	サンプル 注入量
1台	透明PVC	UV-VIS	2.7μL固定
2台 +	PEEK	UV-NIR	ループ式

電気伝導度

4 低価格

基本要素のみで構成
することで
コストダウンに成功



理科って
おもしろい。

uniflows

株式会社ユニフローズ
〒190-0144 東京都あきる野市山田405番地3
TEL 042-533-0508 FAX 042-533-0510
E-mail tokyo@uniflows.co.jp

URL <http://www.uniflows.co.jp>

ユニフローズ

検索



イメージキャラクター
カワセミの「カッタン」